

## 01. HDSD BOOSTER PRO

# TIÊN PHONG ĐẦU NGÀNH THIẾT BỊ LÀM ĐẸP BOOSTER PRO 6-in-1



Hội tụ trong 1 Thiết bị mới  
Công nghệ, kỹ thuật tân tiến, tối ưu hiệu quả dưỡng da  
Căng Bóng - Thon Gọn - Săn Chắc - Lỗ Chân Lông -  
5 Loại Đèn LED - Sonic Vibration

### HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG CHÍNH

\*Hãy nhớ làm quen với phương pháp sử dụng và chu kỳ sử dụng của từng chế độ trước khi sử dụng.

#### CĂNG BÓNG

BOOSTER MODE

**Cách sử dụng** Sau khi thoa dưỡng da thích hợp, áp chặt đầu tiếp xúc lên da và lăn theo chuyển động tròn để hấp thụ sản phẩm. 1-3 lần mỗi ngày (5-10 phút mỗi lần sử dụng)

**Chu kỳ sử dụng** 1-3 lần mỗi ngày (5-10 phút mỗi lần sử dụng)

#### DÒNG ĐIỆN VI MÔ

MC MODE

**Cách sử dụng** Sau khi thoa dưỡng da thích hợp, áp chặt đầu tiếp xúc lên da và kéo từ trong ra ngoài. 1-3 lần mỗi ngày (5-10 phút mỗi lần sử dụng)

**Chu kỳ sử dụng** 1-3 lần mỗi ngày (5-10 phút mỗi lần sử dụng)

#### SĂN CHẮC

EMS MODE

**Cách sử dụng** Sau khi thoa dưỡng da thích hợp, di chuyển chậm và dừng lại trong 1-2 giây tại khu vực cảm nhận kích thích cơ nhiều nhất để thư giãn cơ.

**Chu kỳ sử dụng** 1-3 lần mỗi ngày (5-10 phút mỗi lần sử dụng)

#### SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

AIR SHOT MODE

**Cách sử dụng** Sau khi rửa mặt và lau khô, không bôi dưỡng, quét nhẹ phần đầu nhọn của máy lên vùng da cần chăm sóc. 2-3 lần một tuần (5 phút mỗi lần sử dụng)

**Chu kỳ sử dụng** 2-3 lần một tuần (5 phút mỗi lần sử dụng)

### Thứ tự sử dụng

\*Đây là thứ tự khuyến nghị khi sử dụng hai hoặc nhiều chế độ trong cùng một ngày. Hãy nhớ kiểm tra chu kỳ sử dụng trước khi sử dụng.

AIR SHOT



BOOSTER



MC



DERMA SHOT

Sử dụng 2-3 lần một tuần

Sử dụng 1-3 lần mỗi ngày

## BIỂU THỊ ĐÈN LED

\*Màu LED cho từng chế độ được đặt làm mặc định và chỉ có thể thay đổi màu LED và chuyển sang tím bằng ứng dụng AGE-R.



**Xanh da trời**  
Lỗ chân lông /  
Bã nhờn



**Cam**  
Sáng Da



**Xanh lá**  
Thon gọn



**Đỏ**  
Săn chắc




**Tím**  
Màu sắc dành  
riêng cho ứng dụng

## Rung âm theo chế độ

\*BẬT/TẮT rung âm thanh chỉ khả dụng trong ứng dụng AGE-R.


### Chế độ căng bóng Booster

Chế độ rung giúp đẩy sâu tinh chất vào da

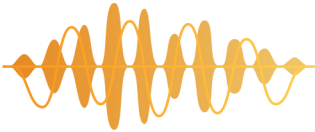


### Chế độ dòng điện vi mô MC

Chế độ rung phù hợp với cách dùng kéo lên

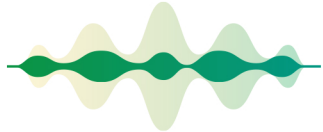


### Chế độ săn chắc Derma Shot

Chế độ rung phù hợp với chuyển động của cơ

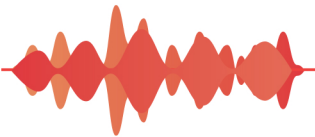

### Chế độ se khít lỗ chân lông Airshot

Chế độ rung chăm sóc tận gốc lỗ chân lông

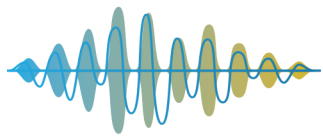

## Cảm biến tiếp xúc với da

\*Do cảm biến rất nhạy, nếu có nhiều sản phẩm dưỡng trên đầu tiếp xúc, thiết bị có thể nhận diện đó là bề mặt da và sẽ tự kích hoạt

\*Để nhận dạng bề mặt da chính xác, hãy cầm thiết bị ở phần giữa khi sử dụng



### Thông minh và tinh tế Được trang bị chức năng cảm biến tiếp xúc với da

Được trang bị cảm biến tiếp xúc da thông minh Đèn LED trung tâm chỉ phát ra khi chạm vào da và chỉ thời gian tiếp xúc da được ghi nhận là thời gian chăm sóc.

## 02. KẾT NỐI BLUETOOTH

# Dễ dàng điều khiển AGER theo cách bạn muốn


Từ cài đặt chế độ, mức độ, âm lượng, độ rung và màu đèn LED mong muốn tới báo cáo tự động ghi lại mọi hoạt động chăm sóc một cách thông minh. Dễ dàng sử dụng và ghi lại những thay đổi của da sau khi dùng

### Thông tin chức năng Bluetooth

01

#### Điều khiển từ xa

Chăm sóc dễ dàng và đơn giản.

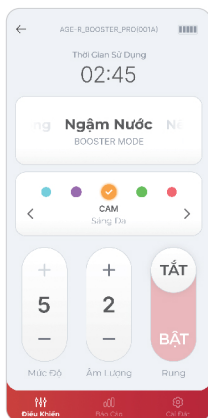

02

#### Báo cáo tự động


Biến việc chăm sóc thành một thói quen.



03

#### Ghi lại trước và sau khi sử dụng

Xem sự thay đổi sau 8 tuần.

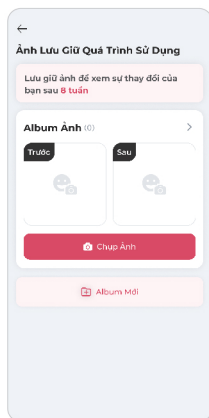

\* Sau khi bật nguồn, tổng thời gian sử dụng (thời gian tiếp xúc với da) của mỗi chế độ phải lớn hơn 20 giây để tải hồ sơ sử dụng lên báo cáo.

\* Cài đặt âm lượng mặc định là 3 mức và khi được đặt thành 0 (tắt tiếng), tất cả các giai điệu, kể cả BẬT/TẮT nguồn, đều bị tắt tiếng.

\* Khi sử dụng, mức âm lượng và trạng thái BẬT/TẮT rung được thay đổi trong tab điều khiển sẽ vẫn ở cài đặt mặc định.



#### Sử dụng Booster Pro 200%

Tải ứng dụng AGER miễn phí ngay bây giờ

Hãy thử sử dụng AGER Booster Pro một cách chuyên nghiệp và tiện lợi hơn.

\* Tìm kiếm 'AGER' trong Apple Store hoặc Google Play

# PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI BLUETOOTH

\*Bluetooth có thể kết nối khi bluetooth của điện thoại thông minh được bật và Booster Pro được bật.


01




02



03

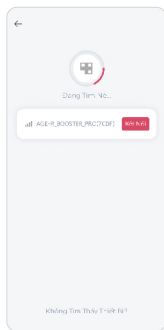

04

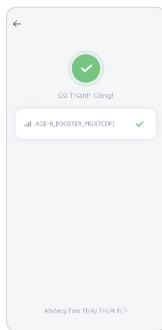

- 1 Truy cập ứng dụng AGER và nhấp vào "Kết Nối BOOSTER PRO"
- 2 Để kết nối Bluetooth, hãy bật Bluetooth của điện thoại thông minh và Booster Pro.
- 3 Kiểm tra thiết bị được phát hiện và nhấp vào biểu tượng kết nối "Kết Nối"
- 4 Bạn sẽ thấy thông báo "Đã Thành Công" cho biết kết nối đã thành công và âm thanh kết nối Bluetooth của Booster Pro.

## Những lưu ý khi kết nối với Bluetooth

### 1. Điều khiển từ xa

Chế độ này chỉ hoạt động khi thiết bị được kết nối với các chức năng BẬT/TẮT thay đổi màu sắc, âm lượng và rung của đèn LED chỉ có thể được sử dụng trong điều khiển từ xa sau khi kết nối Bluetooth.

Mức âm lượng và cài đặt BẬT/TẮT rung trong điều khiển từ xa được lưu làm mặc định nhưng màu đèn LED không được lưu.

### 2. Báo cáo tự động

Lịch sử sử dụng khi thiết bị không được kết nối với ứng dụng sẽ được lưu trữ tạm thời trên thiết bị và được tự động tải lên báo cáo của ứng dụng ngay khi thiết bị được kết nối với ứng dụng. Giai đoạn sử dụng của báo cáo và màu đèn LED cho từng chế độ được lưu dưới dạng mức và màu được sử dụng lâu nhất.

### 3. Thay đổi màu LED mặc định cho từng chế độ

Chỉ có thể thay đổi màu đèn LED mặc định cho từng chế độ khi thiết bị được kết nối và có thể thay đổi/đặt lại trong tab [Cài đặt].

### 4. Lỗi kết nối thiết bị

Vui lòng kiểm tra xem nó có được kết nối với điện thoại thông minh khác hay không. Nếu thiết bị đang được kết nối với điện thoại thông minh khác, hãy bật app ở điện thoại đó sau đó ngắt kết nối thông qua menu [Kết Nối Booster Pro] → [Cài Đặt] → [Ngừng Kết Nối] và thử lại.

### 5. Thay đổi điện thoại thông minh được kết nối

Sau khi mở ứng dụng trên điện thoại, hãy ngắt kết nối ứng dụng thông qua menu [Kết Nối Booster Pro] → [Cài Đặt] → [Ngừng Kết Nối] rồi thử kết nối từ điện thoại thông minh mới.



### Chỉ khả dụng khi được kết nối với Bluetooth

- Thay đổi màu theo chế độ
- BẬT/TẮT rung âm thanh
- Kiểm soát âm lượng
- Kiểm tra báo cáo chăm sóc



### 03. BOOSTER MODE

## Da căng bóng phát sáng với chế độ di tinh chất

#### BOOSTER MODE

#### Cài đặt mặc định: Đèn LED màu cam

Có thể sử dụng với nhiều loại sản phẩm dưỡng da và mặt nạ. Hãy lựa chọn và sử dụng phương pháp phù hợp nhất với bạn trong số 3 phương pháp chạm dưới đây.



#### Phương pháp chạm



#### WATERING

Sau khi áp đầu tiếp xúc lên da, lăn theo chuyển động tròn để đẩy tinh chất



#### BOOSTING

Sau khi áp đầu tiếp xúc lên da, di chuyển đầu tiếp xúc theo chuyển động ngang để đẩy tinh chất



#### FOCUS

Sau khi áp đầu tiếp xúc lên da, ấn và di chuyển từng điểm trong 1-2 giây.

#### Chú ý trước khi sử dụng

\*Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy nhớ bắt đầu dùng từ mức 1 và nâng dần tới mức phù hợp.



#### Khu vực tránh sử dụng

Không sử dụng ở vết hằn, vết thương, khu vực làm thủ thuật hoặc khu vực phẫu thuật.



#### Các khu vực nên sử dụng ở mức độ thấp

Nên sử dụng mức độ thấp cho các vùng nhạy cảm quanh mắt, mũi và miệng.



#### Chu kỳ sử dụng chế độ Booster

1-3 lần mỗi ngày và sử dụng theo hướng dẫn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH



### BƯỚC 01

Sau khi rửa mặt, thoa một lượng sản phẩm dưỡng da thích hợp lên da.



### BƯỚC 02

Tán đều dưỡng da trên toàn khuôn mặt bằng đầu tiếp xúc



### BƯỚC 03

Bật chế độ di tinh chất BOOSTER MODE di tinh chất cho đến khi hấp thụ hoàn toàn. (1-3 lần một ngày /5-10 phút mỗi lần sử dụng)



### BƯỚC 04

Khi hầu hết dưỡng da đã được hấp thụ, kết thúc bằng việc chăm sóc chuyên sâu cho các vùng da có vấn đề.

## 04. Chế độ dòng điện vi mô MC

# Thon gọn sắc nét gương mặt với dòng điện siêu nhỏ Micro Current

### MC MODE

#### Cài đặt mặc định - Đèn LED màu xanh lá

Vui lòng sử dụng bằng cách kéo lên sau khi thoa dưỡng da. Nếu thấy rung yếu trong khi sử dụng, vui lòng điều chỉnh lượng sản phẩm dưỡng da.



### Phương pháp chạm



#### LINING

Ấn đầu đầu tiếp xúc lên da rồi kéo hất lên

#### TIP Cách sử dụng chế độ dòng điện vi mô để tăng hiệu quả

Sử dụng chế độ dòng điện vi mô để kéo nâng da từ trong ra ngoài và sử dụng Chế độ Derma Shot để kích thích các cơ giúp tăng hiệu quả sản phẩm chống lão hoá

MC Mode



Derma Shot Mode

Sử dụng theo thứ tự 2 chế độ này mỗi ngày để đạt hiệu quả tối đa.

### Chú ý trước khi sử dụng

\*Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy nhớ bắt đầu dùng từ mức 1 và nâng dần tới mức phù hợp.



#### Khu vực tránh sử dụng

Không sử dụng ở vết hầu, vết thương, khu vực làm thủ thuật hoặc khu vực phẫu thuật.



#### Các khu vực nên sử dụng ở mức độ thấp

Nên sử dụng mức độ thấp cho các vùng nhạy cảm quanh mắt, mũi và miệng.



#### Chu kỳ sử dụng chế độ MC

1-3 lần mỗi ngày và sử dụng theo hướng dẫn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH



### BƯỚC 01

Sau khi rửa mặt, thoa một lượng sản phẩm dưỡng da thích hợp lên da.



### BƯỚC 02

Đặt đầu tiếp xúc lên toàn bộ bề mặt da rồi kéo từ trong ra ngoài da.



### BƯỚC 03

Kéo vùng cổ và trán lên từ dưới lên trên một lần nữa.



### BƯỚC 04

Khi hầu hết dưỡng da đã được hấp thụ, kết thúc bằng việc chăm sóc chuyên sâu cho các vùng da có vấn đề.

## 05. CHẾ ĐỘ DERMA SHOT

# Săn chắc, đẩy lùi chảy xệ Với chế độ Derma Shot




### DERMA SHOT MODE

#### Cài đặt mặc định | Đèn LED đỏ săn chắc

Sau khi thoa sản phẩm dưỡng da, dùng thiết bị massage ở khu vực cảm nhận được kích thích cơ nhiều nhất. Kiểm tra chuyển động của cơ trong khi sử dụng thiết bị.

### Phương pháp chạm

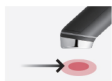

#### FOCUS

Đặt đầu tiếp xúc áp chặt lên da và di chuyển từ từ. Tạm dừng 1-2 giây tại khu vực cảm nhận kích thích cơ mạnh nhất và thư giãn cơ.

#### TIP Cách sử dụng chế độ Derma Shot để tăng hiệu quả

Sử dụng chế độ dòng điện vi mô, kéo từ trong ra ngoài trước. Sau đó kích thích cơ bằng chế độ Derma Shot để tăng độ săn chắc da.

MC Mode



Derma Shot Mode

Sử dụng theo thứ tự 2 chế độ này mỗi ngày để đạt hiệu quả tối đa.

### Chú ý trước khi sử dụng

\*Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy nhớ bắt đầu dùng từ mức 1 và nâng dần tới mức phù hợp.



#### Khu vực tránh sử dụng

Không sử dụng ở vết hầu, vết thương, khu vực làm thủ thuật hoặc khu vực phẫu thuật.



#### Các khu vực nên sử dụng ở mức độ thấp

Nên sử dụng mức độ thấp cho các vùng nhạy cảm quanh mắt, mũi và miệng.



#### Chu kỳ sử dụng chế độ Derma Shot

1-3 lần mỗi ngày và sử dụng theo hướng dẫn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH



### BƯỚC 01

Sau khi rửa mặt, thoa một lượng sản phẩm dưỡng da thích hợp lên da.



### BƯỚC 02

Áp chặt đầu tiếp xúc lên da, di chuyển chậm và dừng lại từ 1-2 giây ở khu vực cảm nhận kích thích cơ rõ nhất để thư giãn cơ.



### BƯỚC 03

Kéo vùng cổ và trán lên từ dưới lên trên một lần nữa.



### BƯỚC 04

Khi hầu hết dưỡng da đã được hấp thụ, kết thúc bằng việc chăm sóc chuyên sâu cho các vùng da có vấn đề.

## 06. CHẾ ĐỘ AIR SHOT

# Làm sạch, se khít lỗ chân lông với AIR SHOT MODE

### AIR SHOT MODE

Cài đặt mặc định :

**Đèn LED xanh sạch da chết / se khít lỗ chân lông**

Sau khi rửa mặt, dùng ngón trỏ trên da mặt khô bằng cách dùng đầu mũi nhọn của máy quét lên da. Nếu dùng trên mặt ướt sẽ không thấy hiệu quả như mong đợi.



### Phương pháp chạm



#### SWEEPING

Chạm nhẹ đầu mũi nhọn lên da và quét lên nhanh chóng



#### Cách dùng ở khu vực da lớn

Khi dùng ở vùng da có diện tích lớn, quét máy ở vùng cạnh mũi nhọn



#### Cách dùng ở khu vực da nhỏ

Đối với các vùng cục bộ như trán, mũi và cằm, chỉ nên quét bằng phần mũi nhọn nhất

### Chú ý trước khi sử dụng

\*Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy nhớ bắt đầu dùng từ mức 1 và nâng dần tới mức phù hợp.



#### Khu vực tránh sử dụng

Không sử dụng ở vết hầu, vết thương, khu vực làm thủ thuật hoặc khu vực phẫu thuật.



#### Các khu vực nên sử dụng ở mức độ thấp

Nên sử dụng mức độ thấp cho các vùng nhạy cảm quanh mắt, mũi và miệng.



#### Chu kỳ sử dụng chế độ Air Shot

Tuần 2-3 lần  
(không dùng quá 1 lần 1 ngày)



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH



### BƯỚC 01

Sau khi rửa mặt, thoa một lượng sản phẩm dưỡng da thích hợp lên da.

\*Tuyệt đối không dùng khi da mặt ướt



### BƯỚC 02

Chạm nhẹ cạnh đầu thiết bị lên da và quét lên nhanh chóng



### BƯỚC 03

Đối với các khu vực nhỏ và nhạy cảm, sử dụng phần mũi nhọn của



### BƯỚC 04

Sau 5 phút sử dụng thiết bị, bôi các bước dưỡng tiếp theo để da căng bóng.



## 07. THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

### Hướng dẫn dùng màn hình LCD



#### MÀN HÌNH MẶC ĐỊNH

① Đèn báo Bluetooth

Ngắt kết nối bluetooth

Trạng thái kết nối Bluetooth  
(\* được liên kết với ứng dụng AGE-R)

③ Chế độ sử dụng hiện tại

④ Mức độ

⑤ Thời gian sử dụng

② Hiển thị Pin

Đầy pin

Pin yếu  
(\*Cần sạc)




#### Màn hình chờ thay đổi chế độ sau khi hoàn thành 5 phút dưỡng da

① Đếm ngược tắt tự động

Tự động tắt sau 10 giây nếu không có thao tác bằng nút riêng

② Thông tin chăm sóc bổ sung

Có thể thay đổi các chế độ khác nhau bằng nút MODE và thao tác ứng dụng

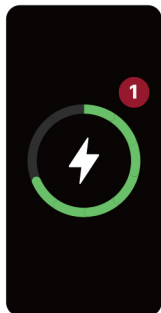

#### Màn hình sạc/pin yếu

① Biểu thị đang sạc

Đèn hiển thị màu xanh lá cây và có thể kiểm tra lượng sạc

(\*Thiết bị không hoạt động khi sạc)

② Màn hình pin yếu

Khi pin yếu, đèn hiển thị màu đỏ và cần được sạc trước khi dùng

③ Màn hình khi được sạc đầy

Tất cả các đèn đều màu xanh lá.

# TÊN CÁC BỘ PHẬN



## CÁCH VẬN HÀNH

1. Nhấn và giữ nút nguồn (3) trong 2-3 giây để bật thiết bị. Khi bật nguồn, màn hình LCD (2) sẽ bật với âm thanh và được tự động đặt ở chế độ BOOSTER cấp độ 1.

2. Nhấn nhanh nút (4) MODE để cài đặt chế độ sử dụng. Mỗi lần bạn nhấn nút (4) MODE, chế độ thay đổi được hiển thị trên màn hình LCD (2) và mỗi lần bạn thay đổi chế độ, âm thanh hướng dẫn chế độ sẽ được hiển thị à màu LED cho từng chế độ được hiển thị trên màn hình LED (5) . \*Thay đổi theo thứ tự sau: Booster Mode → MC Mode → Derma Shot Mode → Air Shot Mode

3. Sau khi cài đặt chế độ, nhấn nhanh nút cấp 3 một lần để điều chỉnh cấp độ. Mỗi lần bạn nhấn nút, cấp độ sẽ tăng lên một cấp và mỗi lần cấp độ tăng lên, cấp độ đã thay đổi sẽ được hiển thị trên 2LCD màn hình. \* Có tổng cộng 5 cấp độ, vui lòng dùng từ cấp độ 1 khi bắt đầu sử dụng

4. Sau khi đặt chế độ và bước sử dụng, hãy sử dụng theo hướng dẫn sử dụng cho từng chế độ. Đảm bảo làm quen với hướng dẫn sử dụng cho từng chế độ trước khi sử dụng.

5. Khi sử dụng, thời gian sử dụng sẽ được thông báo bằng hướng dẫn bằng giọng nói mỗi phút. Nếu sản phẩm được sử dụng quá 5 phút, một tin nhắn thoại hoàn tất việc chăm sóc sẽ được cung cấp và màn hình chờ thay đổi chế độ được hiển thị trong 10 giây trên màn hình LCD (2). Nếu không có thao tác nút/ứng dụng riêng biệt trước khi đếm ngược 10 giây, thiết bị sẽ tự động tắt. Nếu bạn muốn sử dụng chế độ tiếp theo, hãy nhấn nhanh nút 4 chế độ một lần trong vòng 10 giây để thay đổi chế độ.

6. Để sử dụng hợp vệ sinh, hãy nhớ lau sạch đầu tiếp xúc bằng vải khô hoặc miếng bông sau khi sử dụng và bảo quản.

7. Để sạc, hãy kết nối bộ sạc Type C đi kèm với cổng sạc (8) ở phía dưới mặt sau của sản phẩm. \*Khi sạc, trạng thái sạc được hiển thị trên màn hình LCD (2) cùng với âm thanh sạc, sản phẩm không hoạt động trong khi sạc.

## THÀNH PHẦN HỘP SẢN PHẨM

Thân máy, Cấp sạc USB, Tờ HDSD

# 08. Chú ý và bảo hành sản phẩm

## CHÚ Ý KHI DÙNG

01. Sản phẩm có thể gặp sự cố hoặc hư hỏng nếu bị rơi hoặc bị va đập trong quá trình sử dụng
02. Không để nước dính lên sản phẩm.
03. Nếu sản phẩm không hoạt động, không được tự ý tháo rời mà hãy liên hệ với nhà sản xuất.
04. Tháo tất cả các phụ kiện kim loại tiếp xúc với cơ thể trước khi dùng thiết bị
05. Không sử dụng chung các thiết bị điện khác như chân đèn.
06. Không sử dụng ở những nơi có nhiệt độ cao như gần lửa hoặc dưới ánh nắng trực tiếp, và không đặt thiết bị chính hoặc dây điện gần thiết bị sưởi.
07. Không sử dụng vào mục đích khác với mục đích được khuyến dùng
08. Nếu thiết bị này va đập với các sản phẩm khác, nó có thể gây ra trục trặc, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng.
09. Không sử dụng vào mục đích khác với mục đích được khuyến dùng
10. Nếu bạn thấy không khỏe hoặc gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân do bị liệt, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm này.
11. Không đập đầu tiếp xúc lên bề mặt cứng
12. Không đập hoặc làm rơi thiết bị vào vật cứng.
13. Không sử dụng ở những nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc bụi bẩn như phòng tắm, nhà bếp và ô tô.
14. Khi sử dụng, hãy tránh xa các thiết bị điện như thiết bị làm đẹp, TV, radio.
15. Cấm sử dụng trên vết hầu, vết thương, thủ thuật và khu vực phẫu thuật.
16. Không sử dụng ngoài điện áp định mức. Sử dụng ở những nơi vượt quá định mức có thể tạo ra nhiệt, có thể gây cháy, điện giật hoặc trục trặc.
17. Không cầm thiết bị hoặc ngắt kết nối cáp sạc khi tay ướt. Có thể gây điện giật.
18. Không tự mình sửa chữa, tháo rời hoặc sửa đổi bộ phận chính
19. Máy sẽ không hoạt động khi đang sạc.
20. Để nhận dạng da chính xác, hãy cầm thiết bị ở phần giữa.

## CHÚ Ý KHI BẢO QUẢN

1. Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em.
2. Không bảo quản ở những nơi phát sinh sóng từ hoặc điện từ
3. Sau khi sử dụng, lau bằng khăn giấy ướt, gạch sạch hoặc vải mềm và bảo quản ở nơi khô ráo.
4. Đảm bảo bảo quản thiết bị chính ở trạng thái tắt nguồn.
5. Không bao giờ sử dụng các chất dễ cháy như chất pha loãng hoặc benzen vì những chất này có thể gây ra phản ứng hóa học, gây mất màu và biến dạng.

## CHÚ Ý CHO NGƯỜI DÙNG

Vui lòng không sử dụng nếu bạn có sức khỏe đặc biệt kém, đang uống rượu, uống thuốc ngủ, mệt mỏi nghiêm trọng hoặc đang được bác sĩ điều trị. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đau hoặc bất kỳ sự bất thường nào trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng.

**Nếu sử dụng nhiều lần trên cùng một vùng hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây tổn thương cho da, nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, hãy làm mát vùng đó ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.**

\* Ngay cả khi sử dụng bình thường, những người có làn da nhạy cảm có thể bị đỏ nhẹ. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa và thực hiện chăm sóc sau thích hợp.

**Những bệnh nhân có các triệu chứng sau hoặc những người thuộc các tình trạng sau được khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm này.**

01. Da đỏ và ngứa ran do râm nắng quá mức
  02. Người có cơ địa dị ứng và đặc biệt là da nhạy cảm
  03. Người sử dụng các thiết bị điện tử đeo trực tiếp vào cơ thể như máy điều hòa nhịp tim
  04. Người sử dụng các thiết bị y tế điện tử để hỗ trợ sự sống như máy tim phổi
  05. Người sử dụng các thiết bị y tế điện tử như máy điện tâm đồ
  06. Người sử dụng hormone steroid lâu dài
  07. Người có rối loạn chức năng gan và có triệu chứng giãn mao mạch
  08. Người đang điều trị ngoại trú
  09. Vùng mụn bị sưng mủ và viêm nhiễm
  10. Các vùng bị viêm da do mỹ phẩm, người bị viêm da dị ứng
  11. Các vùng bị nám kèm theo ngứa, các vùng bị nổi mụn do kích thích vật lý
  12. Các vùng có chứa kim loại, nhựa, silicon, v.v. trong cơ thể
  13. Bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông, bệnh tim, bệnh cấp tính, vùng xuất huyết, khối u ác tính, vùng gãy xương, bệnh truyền nhiễm, vùng mí mắt, vùng chấn thương, vùng sọ. Ngoài ra Trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và người già nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng
- \* Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế nên không sử dụng cho mục đích điều trị.