



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRẺ HOÁ TOÀN THÂN TRIPOLLAR® POSE VX

Hộp sản phẩm thiết bị trẻ hoá toàn thân
Tripollar® POSE VX

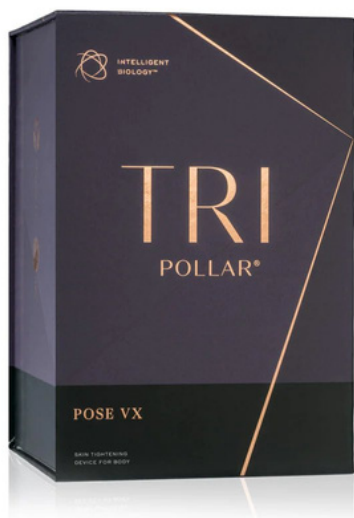

Thiết bị Tripollar® POSE VX

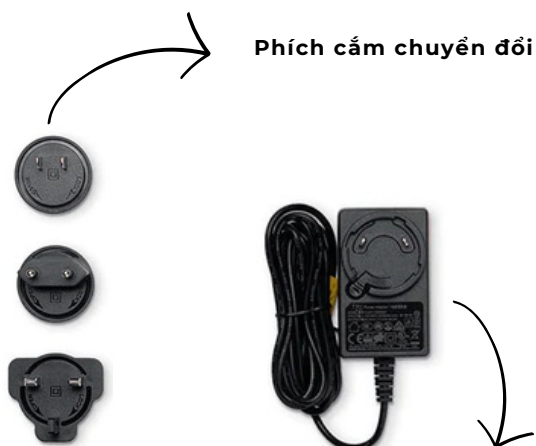


Phích cắm chuyển đổi

Dây điện



Gel Tripollar® Preparation

Khuyến dùng: Dùng Gel Tripollar® Preparation cùng với máy để đạt hiệu quả cao nhất

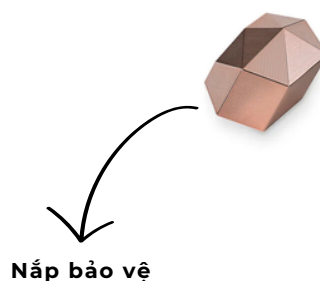

Nắp bảo vệ



Thân máy

4 Điện cực

Quan trọng: Để đảm bảo da không bị kích ứng với Gel Tripollar® Preparation khi thực hiện liệu trình, khuyến nghị thử trước một phần nhỏ trên da trong 24 giờ. Khi dùng thử, thoa một lượng nhỏ Gel Tripollar® Preparation lên cổ tay và tiến hành dùng thiết bị trên vùng da đó. Bạn nên dùng mức độ thấp trước, sau đó điều chỉnh mức độ tăng dần theo khả năng thích ứng của da cho các buổi liệu trình tiếp theo.




1

Làm sạch và lau khô toàn thân trước khi bắt đầu.



2

Mở hộp để lấy thiết bị, dây điện và phích cắm chuyên đổi. Lựa chọn phích cắm tương ứng với ổ cắm điện tại nhà bạn để gắn vào dây điện.

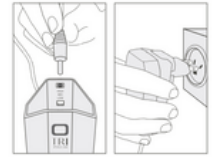

3

Kết nối dây điện với thiết bị. Cắm dây điện vào nguồn điện.




4

Thoa đều 1 lớp mỏng Gel TriPollar® Preparation lên các vùng cơ thể. Lựa chọn vùng để thực hiện liệu trình: đùi, vòng 3, bụng, eo, hông hoặc cánh tay



5


- Tháo nắp bảo vệ khỏi thiết bị.
- Ấn nút nguồn để khởi động thiết bị.
- Bạn có thể lựa chọn giữa 2 chế độ:
 - **Chế độ RF:** đèn xanh lá sáng lên khi ở mức RF thấp. Ấn nút nguồn một lần nữa để thay đổi cấp độ RF (thấp/trung bình/cao). Bạn nên bắt đầu với cấp độ thấp trước.
 - **Chế độ RF+DMA:** để chuyển sang chế độ này bằng cách ấn nút DMA, đến khi đèn màu xanh dương bật sáng. Nên bắt đầu với cấp độ thấp trước.

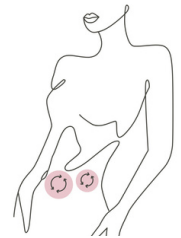

6

Bắt đầu liệu trình

- Đặt thiết bị lên da, dùng lực nhẹ nhàng sao cho 4 điện cực tiếp xúc với da hoàn toàn.
- Bắt đầu thao tác trên vùng da nhỏ
- Di chuyển thiết bị chậm rãi theo chuyển động tròn, không giữ yên ở 1 vị trí cố định. Khi vùng da đạt nhiệt độ tối ưu, đèn sẽ chuyển sang màu cam kèm tiếng "Bíp"

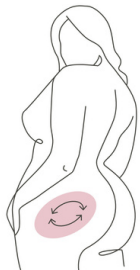


7

Xoay tròn thiết bị trên vùng da rộng hơn. Hãy giữ cho đèn cam được bật sáng trong thời gian càng lâu càng tốt. Duy trì nhiệt độ ấm trong 5 phút. Sau đó di chuyển đến vùng kế tiếp với cách làm tương tự.



8

- Ấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị.
- Rút thiết bị ra khỏi nguồn điện.
- Dùng khăn ẩm lau sạch và đậy nắp thiết bị.

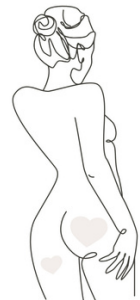

9

Lau sạch Gel Tripollar® Preparation. Bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm cho cơ thể.

Cám ơn bạn đã đọc

Tripollar