

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÁI TẠO VÀ LÀM TRẺ HOÁ LÀN DA TRIPOLLAR® STOP VX2



Khuyến dùng: Dùng Gel Tripollar® Preparation cùng với máy để đạt hiệu quả cao nhất

Quan trọng: Để đảm bảo da không bị kích ứng với Gel Tripollar® Preparation khi thực hiện liệu trình, khuyến nghị thử trước một phần nhỏ trên da trong 24 giờ. Khi dùng thử, thoa một lượng nhỏ Gel Tripollar® Preparation lên cổ tay và tiến hành dùng thiết bị trên vùng da đó. Bạn nên dùng mức độ thấp trước, sau đó điều chỉnh mức độ tăng dần theo khả năng thích ứng của da cho các buổi liệu trình tiếp theo.




1

Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và lau khô trước khi bắt đầu.



2

Mở hộp để lấy thiết bị, dây điện và phích cắm chuyên đổi. Lựa chọn phích cắm tương ứng với ổ cắm điện tại nhà bạn để gắn vào dây điện.

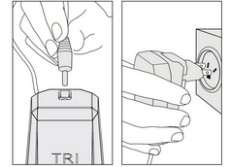


3

Kết nối dây điện với thiết bị. Cắm dây điện vào nguồn điện.



4

Thoa đều 1 lớp mỏng Gel Tripollar® Preparation lên các vùng da: trán, má, cằm và vùng da cổ.

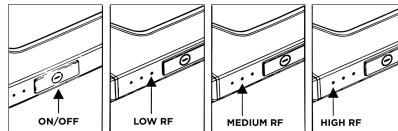

5

- Tháo nắp bảo vệ khỏi thiết bị.
- Ấn nút nguồn để khởi động thiết bị.
- Bạn có thể lựa chọn giữa 2 chế độ:
 - **Chế độ RF:** đèn xanh sáng lên khi ở mức RF thấp. Ấn nút nguồn một lần nữa để thay đổi cấp độ RF (thấp/trung bình/cao). Bạn nên bắt đầu với cấp độ thấp trước.
 - **Chế độ RF+DMA:** để chuyển sang chế độ này bằng cách ấn nút DMA, đến khi đèn màu xanh dương bật sáng. Nên bắt đầu với cấp độ thấp trước.



6

Chia khuôn mặt thành 3 vùng chính: trán, hai má và xương hàm.

Đối với vùng trán và hai má:


- Đặt thiết bị lên da, dùng lực nhẹ nhàng sao cho 4 điện cực tiếp xúc với da hoàn toàn.
- Di chuyển thiết bị chậm rãi theo chuyển động tròn, không giữ yên ở 1 vị trí cố định.
- Mắt xa cho vùng da tại đó được ấm lên. Khi vùng da đạt nhiệt độ tối ưu, đèn sẽ chuyển sang màu cam kèm tiếng "Bíp".



7

Đối với vùng xương hàm:

- Chọn chế độ RF+DMA màu xanh dương (có 2 cường độ). **Chỉ sử dụng chế độ này trên vùng xương hàm.**
- Di chuyển thiết bị từ từ dọc theo xương hàm và tiếp tục thực hiện khoảng 4-5 phút cho mỗi bên.

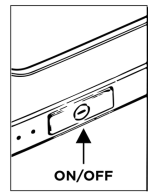

8

- Ấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị.
- Rút thiết bị ra khỏi nguồn điện.
- Dùng khăn ẩm lau sạch và đậy nắp thiết bị.



9

Lau nhẹ lớp Gel Tripollar® Preparation và rửa mặt sạch bằng nước ấm. Bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm nếu muốn.

Cám ơn bạn đã đọc

Tripollar