

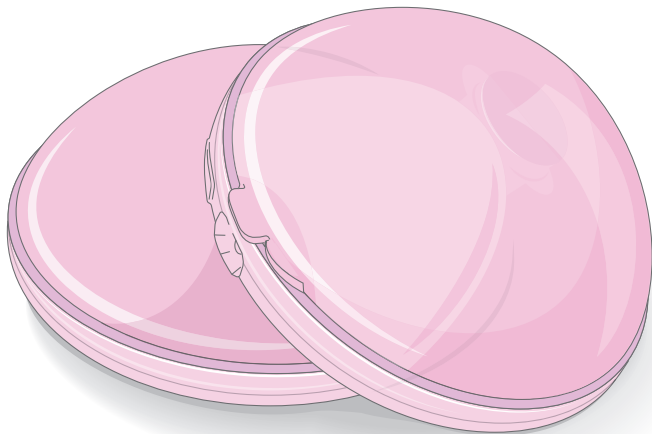


freemjie[®]
SlimFit5
Hands-Free Ultra Discreet Collection Cups

Hướng dẫn sử dụng nhanh

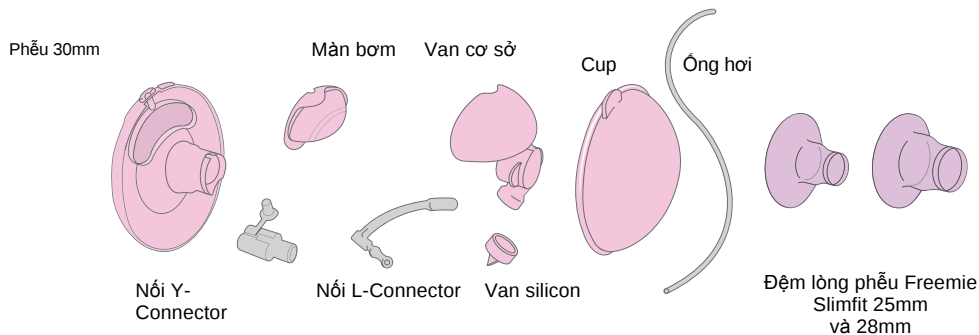


Các thành phần của Freemie SlimFit 5 Cups

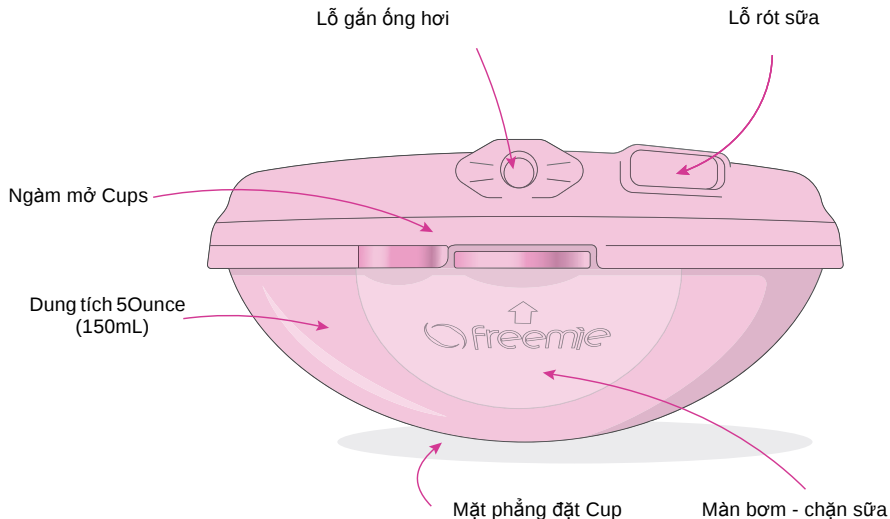


1 Khử khuẩn


Lần đầu : Luộc các bộ phận sau trong nước đang sôi 10 Phút.

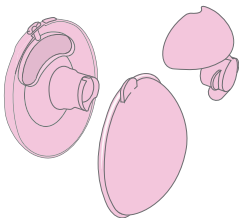

Sau mỗi lần dùng : Rửa và trụng nước sôi già và làm khô.

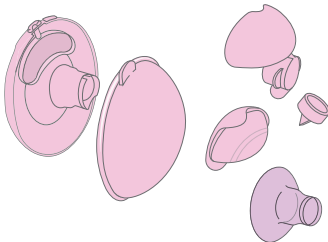

Các bộ phận sau không tiếp xúc với sữa nên không cần rửa sau mỗi lần dùng, lau bên ngoài bằng cồn nếu bẩn.

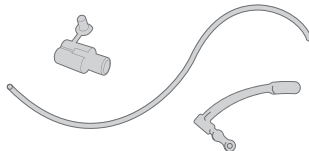

•Để tránh hư hỏng, tăng độ bền, **không** dùng cọ cứng, miếng nhám để rửa. Máy UV, Máy hơi nước cũng **không** khuyến nghị dùng.

•Chỉ gắn Cup ngay trước khi dùng, để rời khi không sử dụng.

2 Lắp ráp




1: Gắn van mô vịt. 2 Gắn màn chắn sữa vào van cơ sở




Note: **viền màn chắn bao lấy van cơ sở.**

Gắn sai - lách sẽ không có lực hút

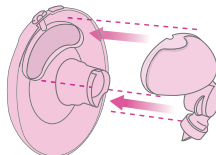


3: Gắn cụm van vào phễu, ép chặt

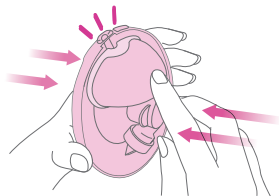


ép chặt

Lỗ tròn cắm dây hơi

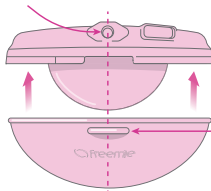

Snap

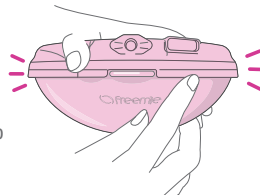


4: Chỉnh vỏ cup trùng với tròn và ép 2 bộ phận với nhau. bạn sẽ nghe âm thanh "Cạch" khi phễu và vỏ cup được ráp lại.


3 Gắn đệm lòng phễu

SlimFit5 Cups sẽ có 2 cặp đệm lòng phễu 25mm và 28mm đi kèm, bạn có thể thử xem size nào thích hợp để sử dụng

SlimFit Fitmie chỉ gắn được SlimFit Cups và có sizes 15mm - 28mm.

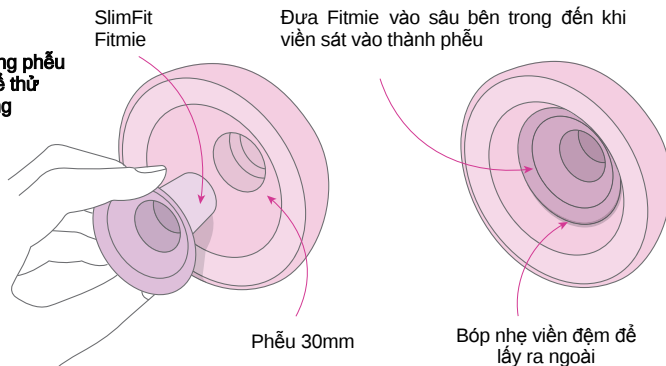

4 Gắn Cup Vào Máy

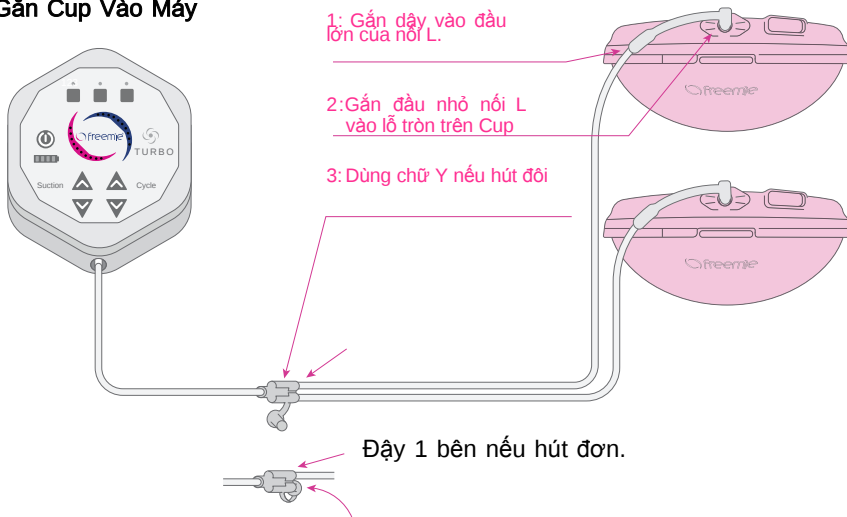


5 Kiểm tra trước khi dùng

Trước khi sử dụng :

- 1: Mở máy lên.
- 2: Bật chế độ Turbo 5/ Turbo.
- 3: Kiểm tra màn chặn sữa , nếu nó phập phồng theo nhịp hút thì lắp ráp chính xác.

Màn chặn bình thường

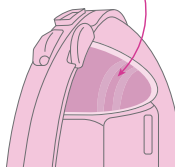


Màn chặn co bóp




Nếu màn chặn không phập phồng thì ráp lại cup và kiểm tra dây hơi.

6 Đặt cup vào áo ngực

- 1: Áo ngực rất quan trọng để sử dụng đúng cách. Áo ngực lỏng sẽ không đủ lực, quá chặt sẽ cản trở quá trình tiết sữa.
- 2: Trước khi chọn áo ngực, hãy giữ Cup tại chỗ bằng tay của bạn. Sau đó, hãy thử một số áo lót giữ chặt các Cup như bàn tay của bạn.
- 3: Có thể cần phải điều chỉnh áo ngực của bạn để tốt nhất cho bạn. Áo ngực thể thao hoặc áo ngực co giãn cho con bú có thể hoạt động tốt.

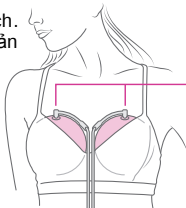

Dây hơi luôn ở hướng 12h

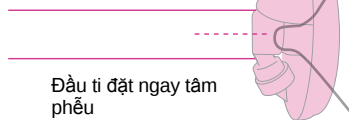


Đầu ti đặt ngay tâm phễu

7 Sau khi Hút Sữa

Tắt máy.

2: Tháo ống hơi .

3: Cẩn thận lấy cup ra khỏi áo ngực

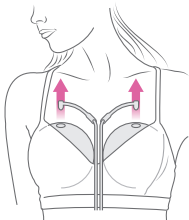

Cup có thể để ngửa trên mặt phẳng



Cup có thể tự cân bằng

lỗ thoát sữa

Trữ sữa
Rót sữa bằng lỗ thoát sữa trên cup.




Tập rót sữa trước bằng nước.

Tư thế hút sữa

Tập bằng nước trước khi bạn hút ở các tư thế khó

Tư thế hút truyền thống

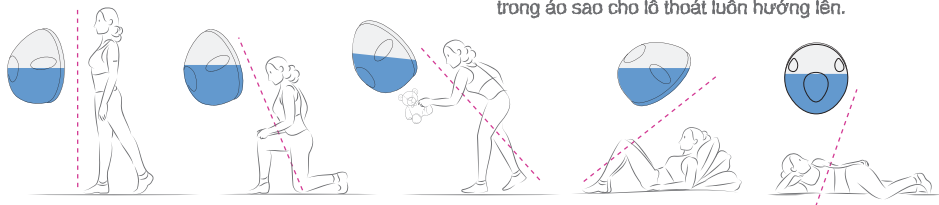

Các Tư Thế có thể gây ọc sữa ra ngoài.


Tự do đi lại với Freemie phụ thuộc:

•Vị trí Cup được đặt trên ngực của bạn

•Độ chặt của áo ngực

•Lượng sữa trong Cup

•Biên độ giao động của Cup

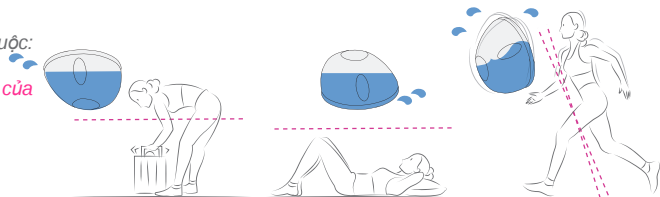

Tìm phễu phù hợp với đầu ti của bạn


Việc tìm kiếm size phễu tốt nhất không thể đơn giản được thực hiện bằng đo núm vú của bạn vì một số núm vú căng hơn những người khác đang được hút. Bạn có thể ước tính kích thước của mình, nhưng có thể cần một số thử nghiệm và sai sót để bạn tối ưu hóa sự thoải mái và sản lượng sữa. Thử nghiệm để tìm ra điều đúng đắn và ghi nhớ:

- Bạn có thể cần một size phễu khác với các size phễu có sẵn.
- Bạn có thể cần size phễu khác nhau cho mỗi núm vú vì đôi khi chúng không hoàn toàn đối xứng.
- Bạn có thể thích lực hút cao hơn, và cần size to hơn để có sự thoải mái cần thiết.
- Núm vú của bạn có thể nở ra về đường kính và chiều dài trong khi hút và có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy giữ tất cả size phễu của bạn.

Sự thoải mái là chìa khóa!

Có thể mất một vài lần thử để tìm ra Size phù hợp.

Kích thước phễu được đo trên độ rộng lòng phễu mà núm vú của bạn chạm vào.

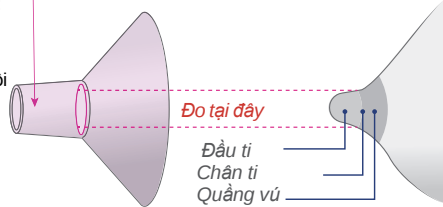

Chọn kích thước khác

Sử dụng thước đo hoặc đường kính đồng xu để

ước tính kích thước núm vú SAU KHI HÚT , và xem lại chỉ tiết về size phễu bên dưới.

Chọn các phễu có kích thước gần nhất hoặc Các đệm Fitmie lớn hơn một chút so với núm vú của bạn.

Kích thước SlimFit Fitmie (15mm - 28mm)

có sẵn tại www.freemie.vn.



Dime: 17.91 mm



Quarter: 24.26 mm




Half Dollar: 30.61 mm

Phễu quá nhỏ

để núm vú di chuyển tự do


Có thể gây ra cọ xát hoặc đau rất

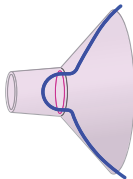

Phễu quá lớn

hút quá nhiều quầng vú vào trong phễu.


Có thể gây vết bầm tím

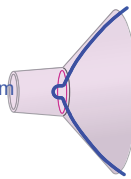

Phễu đúng kích thước :

Đầu ti di chuyển tự do trong lòng phễu.

Chỉ một phần quầng vú được hút vào và không gây đau, rất.

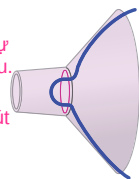

Quan trọng: Áo ngực của bạn cần phải tạo đủ áp lực để tạo ra độ kín trên da để không khí không lọt vào và giảm lực hút. Quá nhiều áp lực có thể chèn ép hoặc tắc nghẽn ống dẫn sữa và làm giảm lượng sữa của bạn.

Cần thêm thể tích đựng sữa? Hãy thử SlimFit6 170ml hoặc Standard Cups 235ml.

SlimFit5

Hands-Free Ultra Discreet Collection Cups



Phụ tùng thay thế có sẵn trên www.freemie.vn

Scan code to read User Manual.



Visit www.freemie.com